

lifeneSTTM

SPM001 / SPM002

- Przeczytaj CAŁĄ instrukcję PRZED rozpakowaniem i UŻYCIEM produktu.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.




ubimed[®]

SPM001 Pasuje do standardowych prostokątnych łóżeczek o szerokości 70 cm*
SPM002 Pasuje do standardowych prostokątnych łóżeczek o szerokości 60 cm*

INSTRUKCJA OBSŁUGI *LifeNest*[™]


**Przeczytaj CAŁĄ instrukcję PRZED rozpakowaniem i UŻYCIEM produktu.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.**


Innowacyjny system do spania dla niemowląt *LifeNest*[™] został zaprojektowany tak, aby spełniał wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, komfortu i higieny. Jest połączeniem miękkości, zaawansowanej technologicznie, oddychającej siatki z komfortem wypełniającej korpus materaca pianki. Wyjątkowa jakość tkaniny siatkowej pozwala na swobodny przepływ powietrza, ciepła oraz płynów.

Materac łóżeczkowy *LifeNest*[™] został zaprojektowany do wykorzystania wyłącznie jako system do spania dla niemowląt. *LifeNest*[™] ma za zadanie zapewnić bezpieczny sen dziecku, leżącemu na plecach z główką oraz tułowiem umieszczonymi na powierzchni siatki (podobnej do hamaka). Przeznaczony jest dla niemowląt od narodzin do 5-go miesiąca życia lub do czasu, gdy dziecko zacznie samodzielnie przewracać się na brzusek.

Piankowy korpus materaca *LifeNest*[™] został wykonany z wysoko zagęszczonej pianki poliuretanowej pokrytej ognioodporną powłoką i wodoodporną, zmywalną tkaniną. W środkowej części posiada siatkę przeznaczoną do podtrzymywania głowy i tułowia dziecka, która pozwala na jednoczesny swobodny przepływ powietrza wokół dziecka poprzez kanały wentylacyjne i siatkę.

Policottonowe prześcieradło *LifeNest*[™] zawiera główną (górną) siatkę 3D przeznaczoną do podtrzymywania głowy i tułowia dziecka. Materiał siatki 3D zaprojektowany został tak, aby zapewnić oddychalność, zmniejszenie nacisku, jak również przepływ ciepła i wilgoci. Mniejsze (boczne) powierzchnie pokryte siateczką zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić przepływ powietrza przez kanały wentylacyjne korpusu materaca.

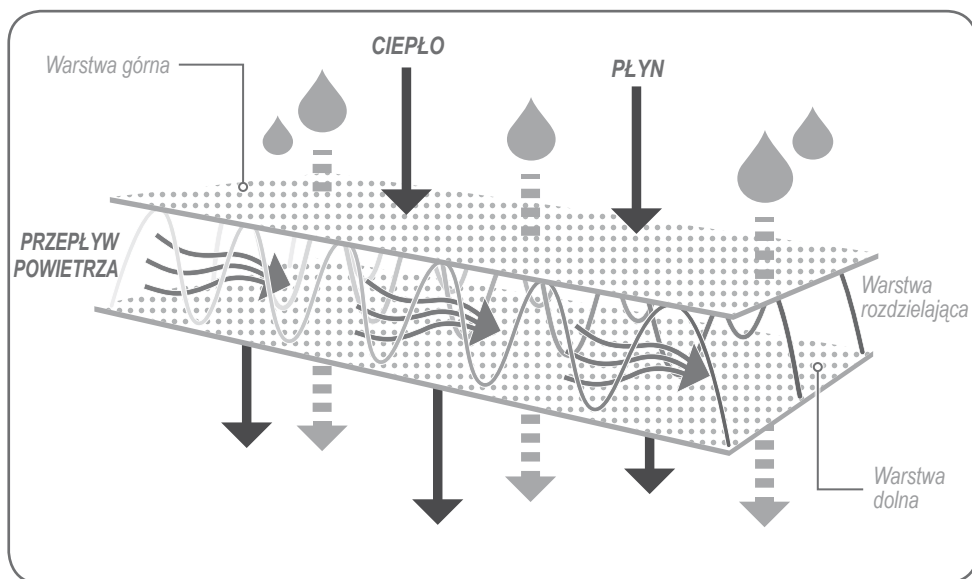

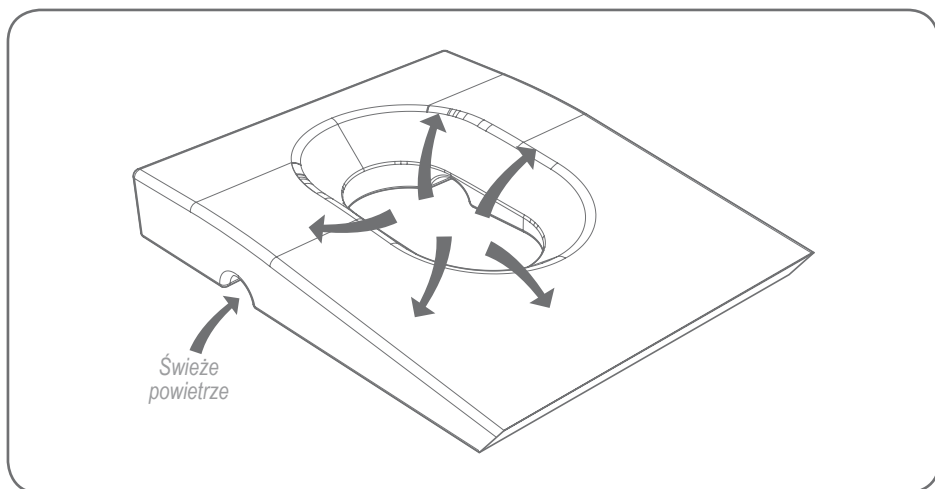


Wymiary materaca SPM001: 85 cm długość, 70 cm szerokość*.
Wymiary materaca SPM002: 85 cm długość, 60 cm szerokość*.

SYSTEM DO SPANIA LIFENEST™ ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY W CELU:

- a) **zapewnienia Twojemu dziecku wygodnej pozycji do spania.** Dziecko powinno być położone na materacu na plecach. W miejscu kontaktu ciała dziecka z materacem następuje lokalne odkształcenie tkaniny siatkowej (siatka dopasowuje się do ciała dziecka), co powoduje zwiększenie powierzchni kontaktu a tym samym zmniejszenie nacisków jednostkowych. Wszystko to sprawia, że Twoje dziecko śpi bardziej komfortowo.

Kontakt ciała dziecka ze standardowym materacem oraz systemem *LifeNest*™

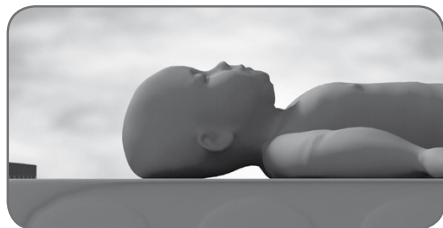

Standardowy materac



System do spania *LifeNest*™

- b) **niewielkiego podniesienia dziecka ułożonego na plecach** (dzięki nieznacznemu pochyleniu powierzchni materaca) co zapewnia komfortową pozycję, zbliżoną do pozycji w łonie matki, pozwalającą na nieskrępowany ruch.
- c) **umożliwienia swobodnej cyrkulacji powietrza** przez siateczkę *LifeNest*™ oraz kanały wentylacyjne w korpusie materaca. To z kolei przyspiesza odprowadzanie, wydychanego przez dziecko, dwutlenku węgla i dostarczanie świeżego powietrza.
- d) pomocy w **zapobieganiu przegrzewaniu** oraz **zmniejszaniu pocenia się dziecka**, uzyskiwanej poprzez swobodny przepływ powietrza wokół jego ciała.
- e) **redukcji ryzyka uduszenia** umożliwiając Twojemu dziecku swobodne oddychanie nawet, gdy przypadkowo obróci się na brzuch. W takim wypadku możliwe będzie oddychanie przez siatkę wentylacyjną materaca.

f) ochrony przed ryzykiem zapłątania i uduszenia się w prześcieradle. Prześcieradło *LifeNest™*, zapinane na zamek błyskawiczny, dokładnie przylega do materaca *LifeNest™*.

g) umożliwienia płynom oraz śluzowi swobodnego przepływu przez powłokę *LifeNest™*, pomagając chronić przed zakrztuszeniem dziecka.

h) utrzymywania Twojego dziecka w komfortowym, suchym otoczeniu, zapobiegając kontaktowi z roztocznymi, które giną na hypoalergicznej powierzchni prześcieradła.

JAK UŻYWAĆ LIFENEST™

WAŻNE:


Prześcieradło *LifeNest™* zostało fabrycznie dopasowane do korpusu materaca.

Ubimed® zaleca, przed pierwszym użyciem, gruntowne przewietrzenie materaca *LifeNest™* oraz wypranie i wysuszenie prześcieradła *LifeNest™*.

Materac *LifeNest™* musi znajdować się w prześcieradle *LifeNest™*. Strona prześcieradła z główną częścią wykonaną z siateczki musi być zwrócona ku górze i umieszczona nad siateczką materaca *LifeNest™*. Suwak prześcieradła *LifeNest™* musi być zamknięty przez cały czas.

- Zamocuj swój system do spania *LifeNest™* na standardowym materacu, który znajduje się w łóżeczku.

- 1 Zamocuj system do spania *LifeNest™* umieszczając wyższą część materaca (górną część materaca) w wezglowiu łóżeczka, stroną z siateczką zwróconą ku górze.
- 2 System do spania *LifeNest™* musi być nachylony ku dołowi, w kierunku przeciwnym do wezglowia łóżeczka.
- 3 Przymocuj prześcieradło *LifeNest™* do szczebelków łóżeczka.
- 4 Upewnij się, że boczne kanały wentylacyjne *LifeNest™* nie są zasłonięte.

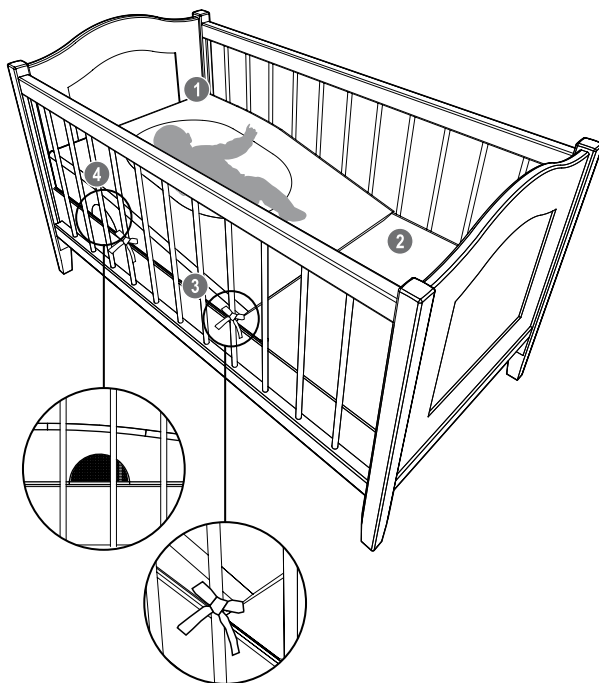

- Zalecana pozycja dziecka na materacu *LifeNest™*:

- Dziecko musi leżeć na plecach głową skierowaną do góry materaca (w stronę wezglowia).
- Głowa i tułów dziecka muszą znajdować się we wgłębieniu materaca pokrytym siatką. Pośladki dziecka będą podtrzymywane przez dolną część tkaniny siatkowej.

Jeżeli powyższe reguły będą przestrzegane, możesz mieć pewność, że Twoje dziecko uzyska maksimum korzyści płynących z użytkowania *LifeNest™*.

W momencie, w którym Twoje dziecko będzie w stanie obracać się swobodnie na brzuch, zaniechaj używania systemu do spania *LifeNest™*.

OSTRZEŻENIA



- NIE UŻYWAJ POZA ŁÓŻECZKIEM. RAMA MATERACA MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ W NAJNIŻSZYM POŁOŻENIU.
- UŻYWAJ *LIFENEST™* TYLKO DLA DZIECI OD URODZENIA DO PIĄTEGO MIESIĄCA ŻYCIA LUB DO OSIĄGNIĘCIA WAGI 9 KG.
- ZANIECHAJ UŻYWANIA *LIFENEST™*, GDY DZIECKO BĘDZIE MOGŁO SWOBODNIE OBRACAĆ SIĘ NA BRZUCH, BĄDŹ GDY BĘDZIE POTRAFIŁO SAMODZIELNIE PORUSZAĆ SIĘ ODPYCHAJĄC SIĘ NÓŻKAMI I RĄCZKAMI, LUB GDY BĘDZIE POTRAFIŁO WSPAĆ SIĘ DÓ POZYCJI STOJĄCEJ.
- UBIMED ZALECA UŻYWANIE Z *LIFENEST™* WYŁĄCZNIE ŚPIWORÓW ZAMIAST STANDARDOWYCH KOCY, KTÓRYCH STOSOWANIE MOŻE GROZIĆ ZAPŁĄTANIEM I UDUSZENIEM.
- NALEŻY KŁAŚĆ TYLKO JEDNO DZIECKO NA JEDEN MATERAC *LIFENEST™*.
- UŻYWAJ TYLKO W STANDARDOWYCH, PROSTOKĄTNYCH ŁÓŻECZKACH. W ŁÓŻECZKU O SZEROKOŚCI 70 CM UŻYWAJ MATERACA SPM001 O SZEROKOŚCI 70 CM. W ŁÓŻECZKU O SZEROKOŚCI 60 CM UŻYWAJ MATERACA SPM002 O SZEROKOŚCI 60 CM. MOŻNA UMIEŚCIĆ TYLKO JEDEN MATERAC *LIFENEST™* W JEDNYM ŁÓŻECZKU.
- ODŁĘGŁOŚĆ POMIĘDZY GÓRNĄ CZĘŚCIĄ *LIFENEST™* A RAMĄ ŁÓŻECZKA NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA NIŻ 2 PALCE.
- NIE ZASŁANIAJ BOCZNYCH OTWORÓW KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH *LIFENEST™* KOCAMI, ZABAWKAMI ANI ŻADNYMI INNYMI PRZEDMIOTAMI.
- NIGDY NIE ZOSTAWIAJ PRZEŚCIERADŁA *LIFENEST™* NIE PRZYMOCOWANEGO DO RAMY ŁÓŻECZKA.
- PRZEŚCIERADŁO *LIFENEST™* ORAZ MATERAC *LIFENEST™* ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE DO WSPÓLNEGO UŻYTKU. UPEWNIJ SIĘ, ŻE UŻYWASZ ORYGINALNYCH PRODUKTÓW WYPRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ UBIMED®.
 - *LIFENEST™* POWINIEN BYĆ UŻYWANY JEDYNIE Z ORYGINALNYM PRZEŚCIERADŁEM *LIFENEST™*. **UŻYWANIE INNEGO PRZEŚCIERADŁA LUB DODATKOWYCH TKANIN MOŻE POWODOWAĆ ZAGROŻENIE UDUSZENIA BĄDŹ ZAPŁĄTANIA SIĘ DZIECKA.**
 - NIGDY NIE UŻYWAJ MATERACA *LIFENEST™* BEZ PRZEŚCIERADŁA *LIFENEST™*.
 - PRZEŚCIERADŁO *LIFENEST™* POWINNO BYĆ UŻYWANE JEDYNIE Z MATERACEM *LIFENEST™*.
- OKRESOWO SPRAWDZAJ CZY NIE POJAWIŁY SIĘ ŻADNE ROZDARCIA BĄDŹ OTWORY W PRZEŚCIERADLE *LIFENEST™*. JEŻELI POJAWIĄ SIĘ JAKIEŚ, NIE PRÓBUJ ICH NAPRAWIAĆ, ZANIECHAJ JEGO UŻYTKOWANIA NATYCHMIĄST PO WYKRYCIU USZKODZENIA. NIE UŻYWAJ PRZEŚCIERADŁA *LIFENEST™* JEŻELI SUWAK ULEGŁ USZKODZENIU. NIE PRÓBUJ GO NAPRAWIAĆ. WYRZUĆ USZKODZONE PRZEŚCIERADŁO I KUP NOWE.
- NIGDY NIE UŻYWAJ PŁASTIKOWYCH POKROWCÓW LUB TOREB TRANSPORTOWYCH OD MATERACA JAKO PRZEŚCIERADEŁ, NIE SPRZEDAWANYCH ANI NIE PRZEZNACZONYCH DO TEGO CELU. MOGĄ POWODOWAĆ RYZYKO UDUSZENIA.



- NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA:

- NIGDY NIE UMIESZCZAJ ŁÓŻECZKA BLISKO OKNA, GDZIE SZNURKI Z ROLET LUB ZASŁON MOGĄ SPOWODOWAĆ UDUSZENIE DZIECKA.
- NIGDY NIE WIESZAJ SZNURKÓW NAD ŁÓŻECZKIEM.
- NIGDY NIE UMIESZCZAJ PRZEDMIOTÓW, KTÓRE POSIADAJĄ SZNURKI, LINKI, WSTAŻKI, TAKICH JAK DZIECIĘCE NAKRYCIA GŁOWY LUB ŚMOCZKI Z TASIEMKAMI, W POKLIŻU SZYI DZIECKA. PRZEDMIOTY TE MOGĄ ZACZEPIĆ SIĘ O CZĘŚĆ ŁÓŻECZKA.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA

- Zawsze układaj dziecko do snu na plecach.
- Używaj łóżeczka spełniające obecne standardy bezpieczeństwa.
- Nie umieszczaj niczego miękkiego bądź puszystego w miejscu spania dziecka. Dotyczy to również poduszek i koców, maskotek oraz innych miękkich przedmiotów.
- Używaj śpioczków lub innych typów piżam zamiast koców, by zapewnić dziecku odpowiednią temperaturę oraz bezpieczeństwo.
- Umieść swoje dziecko osobno, blisko Twojego łóżka, by móc je łatwiej chronić i ułatwić sobie karmienie piersią.
- Zасыpanie z dzieckiem na łóżku, kanapie bądź fotelu jest bardzo niebezpieczne.
- Nigdy nie kładź dziecka do spania na żadnej miękkiej powierzchni. Dotyczy to również łóżek dla dorosłych, łóżek wodnych, poduszek oraz kożuchów.
- Nie używaj klinów do podtrzymywania dziecka lub utrzymywania go na plecach.
- Upewnij się, że Twoje dziecko nie przegrzewa się podczas snu. Używaj lekkich ubranek do snu i utrzymuj temperaturę pokojową, która będzie komfortowa dla lekko ubranego dorosłego.
- Daj dziecku smoczek za każdym razem, gdy kładziesz je do snu. Jeżeli karmisz piersią poczekaj, zanim zaczniesz używać smoczka (przeważnie około miesiąca).
- Upewnij się, że nikt nie pali papierosów w pobliżu dziecka.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach: www.firstcandle.org lub www.AAP.org

DBAJ O SWÓJ SYSTEM DO SPANIA *LIFENEST™*

• Pranie i suszenie:

- Prześcieradło *LifeNest™* może być prane ręcznie bądź w pralce automatycznej w temperaturze 40 °C w łagodnym programie, przy użyciu delikatnych detergentów. Nie wybielać. Wirować powoli. Prać osobno bądź z podobnymi kolorami. Nie prasować.
- Materac *LifeNest™* nie powinien być prany. Jeżeli cokolwiek zostanie na niego wylane zalecamy zdjęcie prześcieradła *LifeNest™* i wytarcie zalanego miejsca wilgotną szmatką. Zapobiegnie to zniszczeniu struktury *LifeNest™*. NIE NALEŻY zanurzać materaca *LifeNest™* w wodzie. Upewnij się, że materac *LifeNest™* jest dokładnie wysuszony przed ponownym użyciem.

• Przechowywanie:

Gdy nie jest używany, przechowuj system do spania *LifeNest™* w torbie, w suchym, bezpiecznym miejscu. Unikaj umieszczania na nim ciężkich bądź ostrych przedmiotów.

OGRANICZONA GWARANCJA

Przez okres 90 dni od dokonania zakupu tego produktu, Ubimed® gwarantuje pierwszemu konsumentowi, że produkt ten będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Ubimed® zobowiązuje się do uznania tej ograniczonej gwarancji. Ubimed® wedle własnego uznania naprawi produkt lub wymieni na taki sam produkt wolny od wad.

Naprawa uszkodzeń lub wymiana produktu jest jedynym sposobem w jaki Ubimed® może dokonać zadośćuczynienia dla konsumenta. Dowód zakupu w postaci faktury bądź paragonu dowodzący, że produkt jest w okresie przewidzianym przez gwarancję, musi zostać przedstawiony w serwisie. Przedłużenie gwarancji przez Ubimed® następuje TYLKO dla pierwszego konsumenta tego produktu i nie może zostać przeniesione.

W sprawie serwisu gwarancyjnego prosimy o kontakt z Topmarket Sp. z o.o.: bok@lifenes.pl, +48 22 5771150.

OGRANICZONA GWARANCJA JEST STOSOWANA W RAMACH PRAWA DANEGO KRAJU. GWARANCJA MA ZASTOSOWANIE POD WARUNKIEM WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA PRODUKTU ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM. GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE UMYŚLNE LUB PRZYPADKOWE ZNISZCZENIA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA ORAZ NIEWŁAŚCIWE JEGO UŻYTKOWANIE. W PRZYPADKU POWYŻSZEGO NARUSZENIA ZASAD OGRANICZONEJ GWARANCJI BĘDZIE ONA ANULOWANA. RÓWNIEŻ NIE ISTNIEJĄ INNE FORMY OGRANICZONEJ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ TEGO PRODUKTU TAKIE JAK: USTNA LUB PISEMNA - OFEROWANE PRZEZ INNE PODMIOTY DO TEGO NIEUPOWAŻNIONE.

ZAREJESTRUJ SWOJĄ GWARANCJĘ ONLINE na: www.lifenes.pl

Jeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące użytkowania LifeNest™ prosimy o kontakt: bok@lifenes.pl, +48 22 5771150.

UDZIELAMY JEDYNNIE INFORMACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM. JEŻELI MASZ JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, PROSIMY O NIE UŻYWANIE LIFENEST™ PRZED KONSULTACJĄ Z LEKARZEM LUB ODPOWIEDNIM SPECJALISTĄ.

* Wszystkie wymiary są przybliżone. Specyfikacja techniczna może się różnić od tutaj przedstawionej.



Class I, 16CFR 1633 Pozytywnie przeszedł otwarty test ogniowy.

Ubimed, Inc Culver City, CA 90232, USA.

Produkt wynaleziony i zaprojektowany w Kalifornii, USA. Wyprodukowany w Chinach.

Przedstawiciel na obszar Wspólnoty Europejskiej:

IMHOTEP création s.a.s - ZI Montplaisir - Rue du champ de courses - 38780 Pont-Eveque – France
tel. +33 (0)4 74 58 39 56, fax +33 (0)4 74 58 39 57

Wzornictwo systemu do spania LifeNest™ oraz znak handlowy są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawo patentowe oraz prawo autorskie. US Patent 7752691.

COPYRIGHT® UBIMED® 2011.

Wylączny dystrybutor na terenie Polski:

Topmarket Sp. z o.o.

ul. Instalatorów 7b, 02-237 Warszawa

www.lifenes.pl, info@lifenes.pl, +48 22 5771150



ubIMED[®]